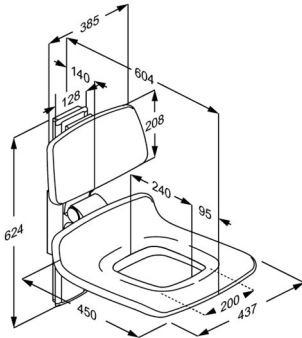




Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, manuell höhenverstellbar R7425000
Farbe	Wei
Produkt- beschreibung	<p>VVS: 777515600 EAN: 5708590359700 HMI: 124344 FDA: INN/D135865</p>  <p>PLUS Duschsitze werden in verschiedenen Farben angeboten. Sie sind sowohl in fester Hhe, elektrisch hhen- verstellbar als auch manuell verstellbar, mit und ohne Pflegeffnung sowie wahlweise mit Rcken- und Armlehnen erhltlich. Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen.</p> <p>PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeffnung und Rckenlehne. Um 380 mm hhenverstellbar, werkzeuglos einhngbar. Hochklappbare Sitz. Materialien: weicher und komfortabler PUR-Schaum mit Holzkern, montiert auf einem Aluminiumprofil. Exkl. Wandbefestigungen. <i>Ersetzt R7421</i></p>
Verstellung Hhenverstellung Produktkapazitt	<p>Hhenverstellbar 380 mm</p> <p>Maximales Anwendergewicht: 200 kg. Bei einer Belastung der Duschsitz mit 200 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 24 kg.</p> <p><i>PLUS Duschsitze wurden statisch mit einem Sicherheitsfaktor 1,5 getestet. Dies entspricht den Anforderungen der geltenden Normen.</i></p>
Materialien	<p>Der Duschsitz besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Sitz und Rckenlehne sind aus PUR-Schaumstoff hergestellt. Beide sind mit einer Oberflchenbeschichtung versehen und mit PUR-Klarlack geschtzt. Sitz beinhaltet Sperrholzkern. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgefhrt. Die Kanten der Rckenlehne und Sitztrger sind mit Abdeckungen aus ABS-Polymer versiegelt.</p>





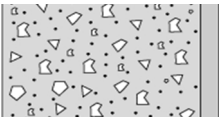
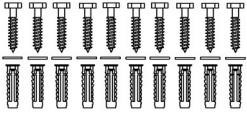

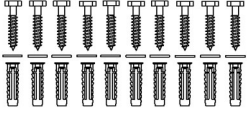
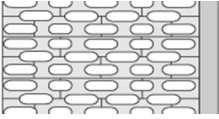
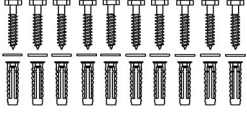
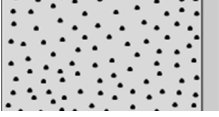
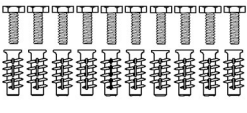
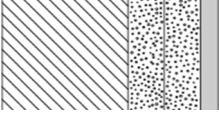
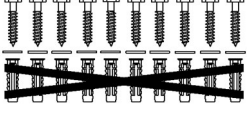
Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, manuell höhenverstellbar R7425000
Ergonomie Funktionen	<p>Ergonomischer Sitz - Sitzfläche 450 x 437 mm. Das weiche und rutschfeste Material fühlt sich nie kalt an und bietet zugleich einen guten Sitzkomfort.</p> <p>Der Duschsitz ist hochklappbar, so dass nach Bedarf zusätzliche Bewegungsfläche geschaffen werden kann. Mit Hilfe eines einfachen und sicheres Klicksystems lasse sich Sitzfläche und Rückenlehne gleichzeitig einstellen.</p>
Garantie Reinigung	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Terralin protect Dismonzon Plus</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetrok Caledor Petrosol Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.





Produkt	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R7425000

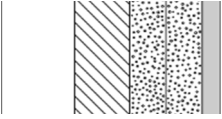
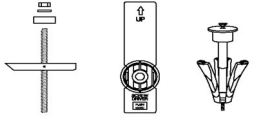
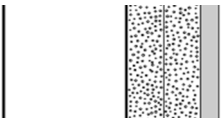
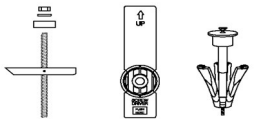
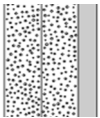
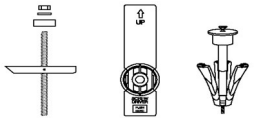
Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8662 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Senkkopfbolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8612 - Befestigungsmaterial, 10 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	





PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	PLUS Duschsitz 450 mit Pflegeöffnung, manuell höhenverstellbar R7425000	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (10 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (10 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfüterung Befestigungsmaterial (10 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®