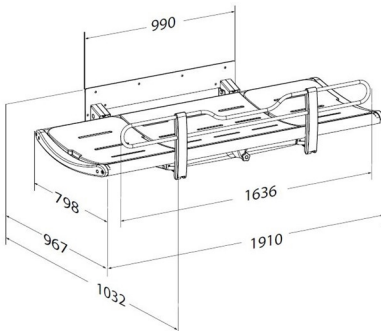




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	SCT 3000 Duschliege, Festmontage R8435318301
Farbe	VVS: 777543193 EAN: 5708590374048 HMI: 130171 FDA: INT/D124320 Graphitgrau (RAL 7024)
Produkt- beschreibung	 <p>Pressalit bietet eine große Auswahl hoch qualitativer Dusch- und Pflegeliegen in verschiedenen Ausführung. Wir bieten zum Beispiel sowohl Elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen, Nicht höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen und Mobile, höhenverstellbare Dusch- und Pflegeliegen. Sie bilden eine sichere Basis für die Pflege und das Umkleiden von Erwachsenen und Kindern in den vielfältigsten Einrichtungen</p> <p>Die Liegen können in können in Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und in Privathaushalten verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine robuste Oberfläche aus, die sowohl komfortabel als auch sehr leicht zu reinigen ist. Die höhenverstellbare Funktion und die Flexibilität gewährleisten optimale Arbeitsbedingungen für den Helfer sowie ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit für den Benutzer.</p> <p>SCT 3000 Duschliege, Festmontage. Hochklappbar. Inkl. Seitengitter und Wasserauffangbehälter mit integriertem Ablauf. Innenmaß 1800 mm, Außenmaß 1032 mm x 1910 mm. Materialien: Lackierter Stahl, Aluminium, weicher PUR-Schaum und Polystyrol. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
Verstellung	Festmontage
Produktkapazität	Maximale Belastbarkeit: 200 kg. Bei einer Belastung der Pflegeliege mit 200 kg, wird jede Montageschraube folglich mit bis zu 60 kg belastet.
Materialien	Materialien: Aluminium, PUR-Schaum, Kunststoff, lackierter Stahl.



Produkt	SCT 3000 Duschliege, Festmontage
Produktnummer	R8435318301
Ergonomie	<ul style="list-style-type: none">• Die ergonomisch geformten Seitengitter des mobilen Duschwagens haben ein praktisches niedriges Mittelstück, welches dem Pflegepersonal einen besseren Zugang und eine bessere Arbeitsumgebung bietet, während die zu pflegende Person auf den Duschwagen versetzt, gewechselt und angezogen werden kann.• Durch die einhändig bedienbaren Seitengitter kann der Betreuer während des gesamten Vorgangs sowohl Augenkontakt als auch physischen Kontakt mit dem Benutzer aufrechterhalten. Die klappbaren Seitengitter bieten einen einfachen Zugang von allen vier Seiten des Duschwagens.• Die leicht zu reinigenden, glatten Kontaktflächen verhindern, dass sich Schmutz ablagert und Bakterien ansammeln.
Funktionen	<p>Durch das integrierte Auffangbecken wird das Wasser über einen Ablaufschlauch in einen Bodenoder Wandablauf abgeführt.</p> <p>Beidseitig aufstellbare Kopfstützen bei der 1800 mm Pflegeliege ermöglichen einen individuellen Einsatz. Die leicht gerundete Auflagefläche bietet enormen Liegekomfort und unterstützt das Sicherheitsempfinden.</p> <p>Das optionale Seitengitter lässt sich einfach hoch- und herunterklappen.</p> <p>Durch den integrierten Gasdruckzylinder lässt sich die Pflegeliege kinderleicht an die Wand klappen. Das schafft Platz und erhöht den Wirkungskreis im Bad, wenn die Liege nicht in Gebrauch ist.</p>
Garantie	<p>Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. HINWEIS Wenn das Gerät in einer Umgebung mit hohem Salz- oder Chlorgehalt der Luft installiert wird, verkürzt sich der Garantiezeitraum von 3 Jahren auf 1 Jahr. Salz und Chlor wirken korrosiv auf die Komponenten des Geräts und verkürzen dadurch dessen Lebensdauer. Die schädliche Wirkung kann jedoch verringert werden, wenn das Gerät täglich mit Leitungswasser abgespült wird.</p>



PRESSALIT®

Produkt	SCT 3000 Duschliege, Festmontage
Produktnummer	R8435318301
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: WipeClean Ethanol Disinfection 80% Wetwipe Ethanol Disinfection 70%</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Wetwipe Universal</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.


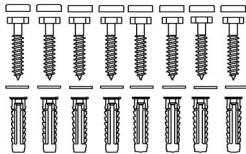

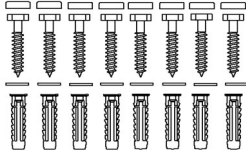
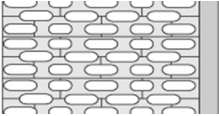
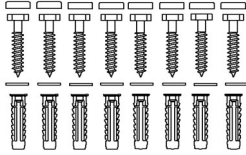
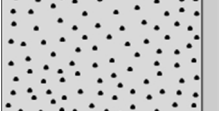
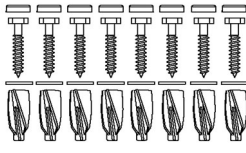
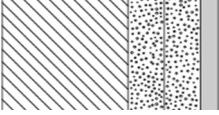
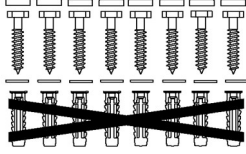




PRESSALIT®

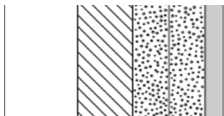
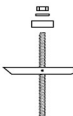

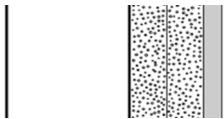
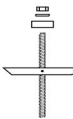

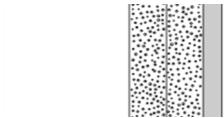

Produkt	SCT 3000 Duschliege, Festmontage
Produktnummer	R8435318301

Montage in verschiedenen Wandtypen

	<p>Beton >B25</p> <p>V8613 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Vollziegel >= Mz12</p> <p>V8613 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Kalklochsandstein >= Hlz12</p> <p>V8613 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Porenbeton P4</p> <p>V8663 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14, mit graue Abdeckung. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung</p> <p>V8613 - Befestigungsmaterial, 8 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12, mit graue Abdeckung. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.</p>	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	SCT 3000 Duschliege, Festmontage R8435318301		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (10 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (10 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.		

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®